

Manuale d'istruzioni Adattatore di grezzo per abutment prefresato Zfx™ per supporti in vetroceramica

Versione: 1/05.2020
Compilato il: 15.05.2020
Data effettiva: 15.05.2020
Sostituisce versione:
Pagina 1 di 2




Indicazioni per l'uso

L'adattatore di grezzo per abutment prefresato Zfx™ per supporti in vetroceramica ha lo scopo di consentire la compatibilità tra il sistema di serraggio di un supporto in vetroceramica e un grezzo per abutment prefresato Zfx™.


Descrizione del dispositivo

L'adattatore di grezzo per abutment prefresato Zfx™ è confezionato singolarmente. L'adattatore viene consegnato preassemblato e consiste dei seguenti componenti:

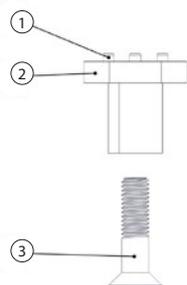


1. Perni di orientamento
2. Adattatore
3. Vite di fissaggio

L'adattatore di grezzo per abutment prefresato Zfx™ facilita la compatibilità tra il sistema di serraggio di un supporto a blocco in vetroceramica e grezzi per abutment prefresati Zfx™ e Zfx™ GenTek contenenti geometrie di collegamento prefabbricate. L'adattatore di grezzo per abutment prefresato Zfx™ può essere usato su tutti i sistemi di serraggio che possono serrare collegamenti 10x10 mm (Figura 1).

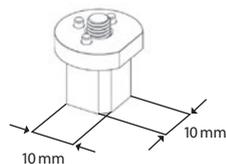


1a. Sistema di serraggio 10x10 mm per adattatore di grezzo per abutment prefresato Zfx™

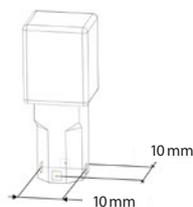


1b. Sistema di serraggio 10x10 mm standard di un blocco in vetroceramica

Installazione

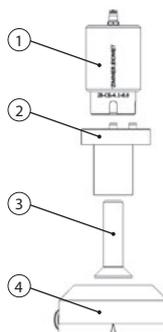


1. Grezzo per abutment prefresato
2. Adattatore
3. Vite di fissaggio
4. Supporto macchine

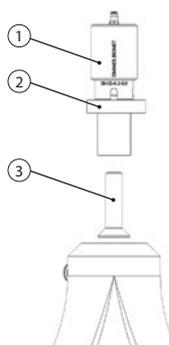

Step 1: Svitare la vite di fissaggio (3) dall'adattatore (2)

Step 2: Il grezzo per abutment prefresato (1) ha tre intagli che servono da orientamento. Orientare gli intagli sul grezzo ai tre perni sull'adattatore (2).

Nota: Prima di assemblare il grezzo per abutment prefresato all'adattatore pulire l'adattatore e il grezzo per abutment con un panno asciutto che non lasci pelucchi, in quanto l'umidità o la sporcizia presenti sul grezzo per abutment prefresato possono dare un risultato di fresatura sfavorevole.

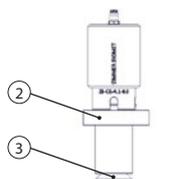

Step 3: Serrare la vite di fissaggio (3) nella porzione filettata del grezzo per abutment prefresato (2)



Step 4: Assemblare l'unità adattatore/grezzo nel rispettivo sistema di serraggio che viene usato, come da specifiche del fabbricante.




Guardate il nostro video d'installazione online
<https://youtu.be/lb8fTzZuWkw>

Manuale d'istruzioni Adattatore di grezzo per abutment prefresato Zfx™ per supporti in vetroceramica

Versione: 1/05.2020
Compilato il: 15.05.2020
Data effettiva: 15.05.2020
Sostituisce versione:
Pagina 2 di 2

Zfx

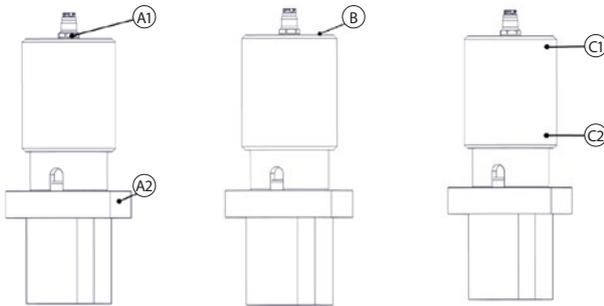

Allineamento del sistema di coordinate con CAM

Le funzioni rilevanti per consentire questo allineamento sono le seguenti:

- × **A** La superficie piatta (A2) sull'adattatore determina l'orientamento esagonale (A1)
- × **B** Superficie superiore (B) dei grezzi per abutment
- × **C** Cilindro esterno dei grezzi pre-abutment
 - Posizione 1: Vicino alla superficie superiore (C1) (vicino al collegamento)
 - Posizione 2: Vicino alla superficie inferiore (C2)

Manutenzione

Al di fuori della calibrazione periodica del supporto, per istruzioni sulla manutenzione della macchina consultare il fabbricante della fresatrice.

Informazioni sul fabbricante



Zfx GmbH
Kopernikusstraße 15
85221 Dachau
Germania

T +49 (0) 8131 / 33 244 - 0
F +49 (0) 8131 / 33 244 - 10
www.zfx-dental.com

